



РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ С ГАРАНТИЙНЫМ ТАЛОНОМ

Электрическая
звуковая
зубная щетка
CS Medica
SonicMax
CS-167-B,
CS-167-W



Благодарим Вас за приобретение
зубной щетки CS-167

Внимательно ознакомьтесь с руко-
водством по эксплуатации до начала
использования данного устройства.
Сохраните это руководство для получе-
ния необходимых сведений в будущем.

Гарантийный талон находится в настоящем
руководстве по эксплуатации.

При покупке требуйте правильного его запол-
нения: проставления печати продавца и даты
продажи.

1. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед использованием прибора внимательно
прочитайте данный раздел.

**Предупреждение! Следующие ситуации явля-
ются потенциально опасными и, если их не пре-
дотвратить, могут привести к серьезной травме:**

- Используйте прибор только по прямому назна-
чению, указанному в данном руководстве.
- Не погружайте прибор в воду или иную жид-
кость.
- Данный прибор не является игрушкой. Не
разрешайте детям играть с прибором. Не допу-
скается использование прибора детьми в отсут-
ствие взрослых.
- Храните устройство в недоступном для детей
месте. Зубная щетка содержит мелкие детали,
которые могут быть проглочены детьми.
- Дети должны использовать зубную щетку
под присмотром взрослых. Рекомендованный
возраст для пользования данной зубной щеткой –
от 12 лет.
- Данный прибор не предназначен для самостоя-
тельного использования лицами (включая
детей) с ограниченными физическими или
умственными способностями, или с недостаточ-
ным опытом и знаниями, если они не будут
обучены и проинструктированы по вопросам
использования прибора лицами, ответственны-
ми за их безопасность.

Общие меры предосторожности

- Обращайтесь с зубной щеткой аккуратно. Не
роняйте ее и не подвергайте сильному ударному
воздействию.
- Нажимайте на кнопку подушечкой пальца, а не
ногтем, чтобы не повредить поверхность кноп-
ки.
- Храните устройство вдали от огня, высоких тем-
ператур и прямых солнечных лучей.
- Не храните устройство в местах, подверженных
сильным ударам или вибрации (например, в
местах, где устройство легко может упасть на
пол).
- Не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать
устройство самостоятельно.
- Перед каждым использованием осматривайте
прибор и его компоненты на предмет наличия
повреждений и/или следов износа. В случае
обнаружения неисправностей или повреждений
не пользуйтесь изделием и обратитесь в бли-
жайший к Вам центр технического обслужива-
ния продукции CS Medica, адреса которых ука-
заны в настоящем руководстве.

Предосторожности медицинского характера

- Проконсультируйтесь со своим стоматологом
перед использованием устройства, если к Вам
относится что-либо из нижеследующего:
 - чувствительные зубы или десны;
 - недавно перенесенная стоматологическая
хирургическая операция;
 - прохождение курса лечения, связанного с
проблемами в ротовой полости.

- Прекратите использовать устройство и прокон-
сультируйтесь со своим стоматологом, если у
Вас наблюдается сильная кровоточивость десен
после недели пользования данной зубной щет-
кой, а также в случае возникновения боли или
дискомфорта во время использования щетки.
- Проконсультируйтесь с врачом, если у Вас уста-
новлен электрокардиостимулятор.
- Считается, что абразивные вещества, содержа-
щиеся в зубной пасте для удаления пятен от
табака или отбеливания зубов, могут серьезно
повредить эмаль в случае их продолжительного
использования. Проконсультируйтесь со своим
стоматологом перед тем, как начать использо-
вание зубных паст с повышенным содержанием
абразивных веществ совместно с электриче-
ской зубной щеткой.
- Зубная щетка является предметом личной гиги-
ены и должна использоваться индивидуально.
- Не прижимайте зубную щетку к зубам и деснам
слишком сильно и не касайтесь их никакими
другими пластиковыми деталями щетки, кроме
щетины. Не чистите одну область в течение про-
должительного времени.
- Заменяйте насадку для щетки не реже одного
раза в три месяца.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

Данный прибор предназначен для ухода за
полостью рта взрослых и детей от 12 лет.

3. ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

Ниже приведены основные составные части
прибора:



Дополнительно можно приобрести:
Насадки CS Medica SP-10-B, SP-10-W для элек-
трической звуковой зубной щетки CS-167 (в комп-
лекте 2 насадки).


4. ПЕРЕД ПРИМЕНЕНИЕМ

УСТАНОВКА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

1. Поверните крышку отсека для элемента питания по часовой стрелке (рис.1).
2. Установите один эле-
мент питания типа AAA,
соблюдая полярность,
указанную сзади на
нижней части рукоятки
(рис. 2).
3. Установите обратно
крышку батарейного
отсека (рис. 3).

ЗАМЕНА НАСАДКИ

Поверните насадку против часовой стрелки и
потяните вверх, чтобы снять.
Установите насадку обратно.

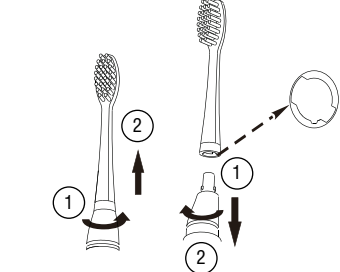

5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

1. Смочите щетину водой и выдавите на
нее немного зубной пасты. После этого поме-
стите щетку в ротовую полость.

Примечание:

Чтобы предотвратить разбрызгивание зубной
пасты, включайте и выключайте зубную щетку
только при ее нахождении во рту.

2. Расположите щетинки насадки под углом
45 градусов по отношению к линии десны.

3. Нажмите кнопку ВКЛ/ВЫКЛ, чтобы включить
питание щетки.

5. Аккуратно касаясь зубов и десен щетинками,
медленно перемещайте головку щетки по
зубам в горизонтальном направлении, совер-
шая легкие круговые движения и задержива-
ясь по несколько секунд на поверхности каж-
дого зуба, захватывая межзубные промежутки
и десны, для наилучшей очистки и массажного
воздействия.


8. Завершив чистку зубов, не вынимая щетку
изо рта, нажмите на кнопку ВКЛ/ВЫКЛ
чтобы выключить зубную щетку.

5. Промойте головку щетки под проточной
водой. Аккуратно стряхните излишек воды.


ПРАВИЛЬНАЯ ЧИСТКА ЗУБОВ



Поверхность зуба и
окклюзионная поверх-
ность: во время чистки
держите щетину под уг-
лом 90 градусов к по-
верхности зуба.

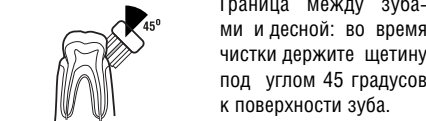

Граница между зуба-
ми и десной: во время
чистки держите щетину
под углом 45 градусов
к поверхности зуба.

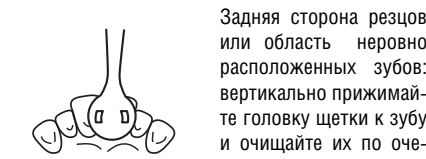

Задняя сторона резцов
или область неровно
расположенных зубов:
вертикально прижимай-
те головку щетки к зубу
и очищайте их по оче-
реди, учитывая угол
расположения зубов.
Примечание:

В начале пользования электрической зубной
щеткой Вы можете испытывать ощущение
щекотки или покалывания, вызываемого дви-
жением щетинок. Со временем, по мере привы-
кания к зубной щетке, это ощущение пройдет.

6. ОЧИСТКА

Внимание: Категорически запрещается мыть при-
бор или его компоненты в посудомоечной машине.

1. Снимите насадку с рукоятки.
2. Тщательно промойте насадку как снаружи, так
и изнутри проточной водой. Стряхните изли-
шек воды. Допускается периодическое выдер-
живание насадки в специальных очищающих
растворах для зубных протезов.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Сроки гарантии:
Рукоятка (электронный блок) – 2 года
Насадка – 3 месяца

Модель _____

Серийный номер _____

Дата продажи _____


« _____ » _____ Г.

Штамп магазина

Подпись продавца

С условиями гарантийного обслуживания
ознакомлен,
внешний вид проверил, товар в полной
комплектации получил

Подпись покупателя

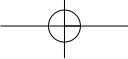

Дата обращения _____

« _____ » _____ Г.

Заклчение мастера, выполненные работы

Дата выдачи (возврата)
прибора потребителю

« _____ » _____ Г.

Подпись
или штамп мастера

Работу принял _____
(подпись клиента)

9. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование	Электрическая звуковая зубная щетка CS Medica SonicMax
Модель	CS-167-B, CS-167-W
Потребляемая мощность	0,3 Вт
Источник питания	1 алкалиновый (щелочной) элемент питания типа AAA
Время работы от одного элемента питания	120 дней (при условии, что щетка используется 2 раза в день по 2 минуты)
Частота колебаний	28000 движ. /мин.
Условия эксплуатации	Температура окружающего воздуха От 0 до 50 °С
Относительная влажность	От 30 до 80%
Атмосферное давление	От 700 до 1060 гПа
Условия хранения и транспортирования	Температура окружающего воздуха От -30 до 60 °С
Относительная влажность	От 30 до 80%
Атмосферное давление	От 700 до 1060 гПа
Масса	20 г
Габаритные размеры	16,05 х 16,05 х 192,8 мм
Срок службы	2 года
Комплект поставки	Рукоятка (электронный блок) с насадкой, допол- нительная насадка, защитный колпачок, алкалиновый элемент питания типа AAA, руко- водство по эксплуатации с гарантийным талоном

10. РАСШИФРОВКА СИМВОЛОВ

	Единый знак обращения продукции на рынке Евразийского экономического союза
	Знак соответствия директиве ЕС
	Прибор выполнен в соответствии с европейской директивой, огра- ничивающей содержание вредных веществ для обеспечения защиты окружающей среды
	Обратитесь к руководству по эксплуатации
	Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой
	Производитель
	Температурный диапазон /Диапазон влажности /Ограничение атмосферного давления
	Серийный номер
	Утилизация прибора
	Утилизация элементов питания

	Возможность утилизации использованной упа- ковки
	XX — цифровое обозначение материала упаковки
	YYYYY — буквенное обозначение материала упа- ковки
	Бумага
	полистирол
	Бумага

11. ДАТА ПРОИЗВОДСТВА

Дата производства зашифрована в серийном номере, который расположен на упаковке прибо- ра и имеет структуру YYMMNNNN, где YY обозна- чает последние две цифры года производства, М — номер месяца производства (1–9 соответ- ствуют месяцам с января по сентябрь, Х — октябрь, Y — ноябрь, Z — декабрь), NNNNN — порядковый номер изделия, а также в ЛОТ номере, который расположен на дне отсека для элементов питания и имеет структуру YYMMNNN, где YY обозначает последние две цифры года производства, М — номер месяца производства (1–9 соответствуют месяцам с января по сентябрь, Х — октябрь, Y — ноябрь, Z — декабрь), NNN — номер партии.

12. УТИЛИЗАЦИЯ

Надлежащая утилизация продукта (отработанное электрическое и электронное оборудование)

Этот символ на приборе или описании к нему указывает, что данный прибор не подле- жит утилизации вместе с другими домашними отходами по окончании своего срока службы. Чтобы предотвратить возможный ущерб для окружающей среды вследствие неконтролируе- мой утилизации отходов, пожалуйста, отделите это изделие от других типов отходов и утилизи- руйте его надлежащим образом для рациональ- ного повторного использования материальных ресурсов.

Для утилизации прибора обратитесь в специа- лизированные пункты приема, расположенные в Вашем городе, или к местным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть данный прибор для экологи- чески безопасной переработки.

По вопросу утилизации элементов питания обратитесь в специализированные пункты прие- ма, расположенные в Вашем городе, или к мест- ным органам власти для получения подробной информации о том, куда и как вернуть батареи для экологически безопасной переработки.

13. СЕРТИФИКАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

Свидетельство о государственной регистрации № KG.11.01.09.014.R.000060.01.20 от 16.01.2020. Срок действия до 16.01.2025. Соответствует ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков». Декларация о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.КА01.В.20792/20 от 07.02.2020. Срок действия до 06.02.2025. Соответствует ТР ТС 007/2011 «О безопасности продукции, предназначенной для детей и подростков».

Декларация о соответствии № ЕАЭС N RU Д-СН.НВ11.В.05807/20 от 26.02.2020. Срок действия до 25.02.2025. Соответствует ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники».

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И ЦЕНТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОДУКЦИИ ТОРГОВОЙ МАРКИ CS MEDICA В РОССИИ

Адрес и телефон Центра технического обслуживания в Москве: ООО «СиЗс Медика ТехЭксперт» **127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 14** (м. «Маяковская») **Тел/факс:** (499) 995-11-32 (многоканальный) **Email:** cstechexpert@mail.ru **www.cstechexpert.ru**

Часы работы Центра технического обслуживания в Москве: пн-пт: с 9:30 до 19:00 (без перерыва на обед), сб: с 10:00 до 18:00 (без перерыва на обед), вс и праздничные дни — выходной

Произведено по заказу и под контролем ООО «СиЗс Медика», импортера и уполномоченного представителя производителя, официального представителя торговой марки CS Medica на территории Российской Федерации, а также Евразийского экономического союза

127006, Москва, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, комната 9
Тел: (495) 363-26-52
Тел/факс: (495) 363-16-56
Email: csinfo@csmedica.ru
www.csmedica.ru, сизсмедика.рф

Бесплатная горячая линия по России: 8-800-555-00-80

Производитель:
NINGBO SEAGO ELECTRIC CO., LTD
(НИНБО СИГОУ ЭЛЕКТРИК КО., ЛТД)
No.239 Jianghu Road, Zone C Hongtang Industrial Park, Jiangbei District, Ningbo, China
(№ 239 Цзянху Рoad, Зоун С Гонтанг Индастриал Парк, Цзянбэи Дистрикт, Нинбо, Китай)
Сделано в Китае

Дата выпуска текущей версии руководства по эксплуатаии: 15.07.2020

- Арзамас, ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Жуковского, д. 13/2, оф. 22, тел.: (831) 472-96-05, arz_cs@bk.ru
- Армавир, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), ул. Тимирязева, д. 26, тел.: (86137) 58-202, cs_medicarm@mail.ru
- Архангельск, ООО «СиЗс Медика Поморье», ул. Северодвинская, д. 63, тел.: (8182) 64-09-55, 20-22-10, pomorie@csmedica.ru
- Астрахань, ООО «СиЗс Медика Астрахань», ул. Боевая, д. 134, корп. 5, тел.: (8512) 38-20-78, astrahan@csmedica.ru
- Барнаул, ООО «СиЗс Медика Алтай», ул. Юрина, д. 1886, тел.: (3852) 54-37-54, 60-30-22, cs-baraul@mail.ru
- Белгород, ООО «СиЗс Медика Белгород», ул. Архиерейская, д. 2А, оф. 11, тел.: (4722) 42-12-94, belgorod@csmedica.ru
- Благовещенск, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Калинина, д. 103, оф. 215, тел.: (4162) 53-12-23, 53-12-25, csmedica-amur@yandex.ru
- Братск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Мира, д. 41 тел.: (3953) 36-29-28, bratsk@csmedica.ru
- Брянск, ООО «СиЗс Медика Брянск», 2-й Советский пер., д. 3, оф. №1, тел.: (4832) 37-15-93, 37-15-94, cs-bryansk@bk.ru
- Великий Новгород, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Мерецкова-Волосова, д. 9, тел.: (951) 722-15-75, povgorod@csmedica.ru
- Владивосток, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Лазо, д. 9, оф. 101, тел.: (4232) 37-00-57, 60-60-28, csmedica-dv@mail.ru
- Владимир, ООО «СиЗс Медика Владимир», ул. Сурикова, д. 10А, оф. 6, тел.: (4922) 52-64-47, csmedica-vladimir@mail.ru
- Волгоград, ООО «СиЗс Медика Нижняя Волга», ул. Землянского, д. 7, оф.24, тел.: (8442) 23-84-44, 23-31-14, 24-34-49, csmedica34@mail.ru
- Вологда, ООО «СиЗс Медика Вологда», Советский пр-т., д. 50, оф. 5, тел.: (8172) 75-45-76, csmedika@vologda.ru
- Воронеж, Офис «СиЗс Медика Черноземье», ул. Степана Разина, д. 37, оф. 8, 9, 10, тел.: (473) 255-08-73, (473) 255-08-76, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Степана Разина, д. 37, оф. 7, 11, тел.: (473) 232-03-58, voronezh@csmedica.vrn.ru
- Екатеринбург, Офис ООО «СиЗс Медика Урал», ул. Турганева, д. 30А, тел.: (343) 222-74-75, region66@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. 8 Марта, д. 5, оф. 117, тел.: (343) 371-30-84, 371-34-11, service66@csmedica.ru
- Иваново, ООО «СиЗс Медика Ярославль», ул. Степанова, д. 5, оф. 105, (4932)26-76-90, 26-76-10, csmedica-ivanovo@mail.ru
- Ижевск, ООО «СиЗс Медика Вятка» (Киров), ул. 40 лет Победы, д. 122, тел.: (3412) 377-545, 377-664, csmedica18@mail.ru
- Иркутск, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Депутатская, д. 79, пом. 30, тел.: (3952) 48-74-74, (3952) 43-69-05 office38@csmedica.ru
- Йошкар-Ола, ООО « СиЗс Медика Чебоксары», пр-т Гагарина, д. 14А, тел.: (8362) 42-65-81, 42-26-73, csm@mar-el.ru
- Казань, ООО «СиЗс Медика Казань», ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843) 527-51-06, 527-64-43, cskzn@mail.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Чистопольская, д. 81, оф. 13, тел.: (843)528-01-70, cskzn5@mail.ru
- Калининград, ООО «СиЗс Медика Калининград», ул. Нарвская, д. 49е, оф. 206, тел.: (4012) 95-38-65, kaliningrad@csmedica.ru
- Калуга, ООО «СиЗс Медика Калуга», ул. Окружная, д. 7, тел.: (4842) 909-989, 595-069, 909-989, (903) 636-50-69, csmedica_kaluga@mail.ru
- Кемерово, ООО «СиЗс Медика Кемерово», ул. Свободы, д. 35, оф. 103, тел.: (3842) 59-22-02, 65-74-60, kemergovo@csmedica.ru
- Киров, ООО «СиЗс Медика Вятка», Студенческий пр-т, д. 19, к. 2, тел.: (8332) 51-36-25, 51-36-26, cs43@mail.ru
- Кострома, ООО «СиЗс Медика Ярославль», пр-т Мира, д. 51, оф.7, тел.: (4942) 63-77-79, (4942) 55-28-73, csmedica-kostroma@mail.ru
- Краснодар, Офис ООО «СиЗс Медика Кубань», ул. Севастопольская, д. 6/1, тел.: (861) 238-47-80, 238-47-90, otmop@kubanet.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Севастопольская, д. 6/1, оф. 17, тел.: (861) 238-47-95, service23@csmedica.ru

- Красноярск, ООО «СиЗс Медика Енисей», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 601, 602, тел.: (391) 221-24-83, 221-20-72, 221-60-98, info@csmedicaenisey.ru
- Курск, ООО «СиЗс Медика Курск», ул. Гайдара, д. 18, этаж 1, тел.: (4712) 74-00-78, 74-00-79, csmedica-kursk@yandex.ru
- Липецк, ООО «СиЗс Медика Липецк», ул. Политехническая, д. 3, тел.: (4742) 25-60-16, (4742) 25-60-12, lipetsk@csmedica.ru
- Магнитогорск, ООО «СиЗс Медика Челябинск», ул. Октябрьская, д. 9, тел.: (3519) 29-49-14, mgp@csmedica.ru
- Махачкала, ООО «СиЗс Медика Махачкала», ул. Батырая, д. 11, оф. 734, тел.: (8722) 55-85-40, (928) 941-00-20, csmahachkala@mail.ru
- Минеральные Воды, ООО «СиЗс Медика Северный Кавказ», ул. Новоселов, д. 106, тел.: (87922) 6-02-31, факс: 6-06-48, csmedicakmv@mail.ru
- Мурманск, ООО «СиЗс Медика Карелия» (Петрозаводск), пр-т Кольский, д. 196, 2 этаж тел.: (8152) 52-53-43, murmansk@csmedica.ru
- Набережные Челны, ООО «СиЗс Медика Казань», пр-т Московский, д. 91, тел.: (8552) 58-94-97, csmedica16-4@mail.ru
- Нижнеартовск, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Ханты-Мансийская, д. 2, стр. 1, моб.: (982) 145-15-20, nvk@csmedica.ru
- Нижний Новгород, ООО «СиЗс Медика Поволжье», ул. Горького, д. 48/50, тел.: (831) 434-44-77, 433-90-90, csmedica@csmedica.nnov.ru
- Новокузнецк, ООО «СиЗс Медика Кемерово», пр-т Металлургов, д. 48, тел.: (923) 464-05-18 novokuznetsk@csmedica.ru
- Новосибирск, ООО «СиЗс Медика Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, тел.: (383) 346-18-11, 346-20-68, cs-siberia@mail.ru
- Омск, ООО «СиЗс Медика Омск», ул. Декабристов, д. 104, тел.: (3812) 210-300, 59-55-03, csmedika_omsk@mail.ru
- Орел, ООО «СиЗс Медика Орел», ул. Московская, д.80, тел.: (4862) 54-24-00, orel@csmedica.ru
- Оренбург, ООО «СиЗс Медика Оренбург», ул. 8 Марта, 21 / ул. Правды, 22, тел.: (3532) 404-607, 404-608, csorenburg@mail.ru
- Орехово-Зуево, ООО «СиЗс Медика Подмоскowie», Московская обл., г. Орехово-Зуево, ул. Володарского, д. 80а, тел.: (499)504-43-28, csrodmoskovie@mail.ru
- Пенза, ООО «СиЗс Медика Пенза», ул. Калинина, д. 89, тел.: (8412) 56-18-37, 32-05-05, penza@csmedica.ru
- Пермь, ООО «СиЗс Медика Пермь», ул. Мильчакова, д. 28, тел.: (342) 229-78-75, permt@csmedica.ru
- Петрозаводск, ООО «СиЗс Медика Карелия», ул. Маршала Мерецкова, д. 16, оф. 6, тел.: (8142) 59-27-14, karelia@csmedica.ru
- Псков, ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», ул. Леона Поземского, д. 10, пом. 1001, тел.: (911) 885-07-56, pskov@csmedica.ru
- Россошь, ООО «СиЗс Медика Черноземье» (Воронеж), ул. 9 Января, д. 12, тел.: (47396) 4-88-94, rossoch@csmedica.ru
- Ростов-на-Дону, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Фурмановская, д. 148, тел.: 8 (863) 231-03-85, 8 (863) 231-03-86, 8 (863) 231-04-85, 8 (863) 231-04-86, 8 (863) 231-07-87, rostov@csmedica.ru
- Рязань, ООО «СиЗс Медика Рязань», ул. Семена Середы, д. 42, тел.: (4912) 50-04-03, 96-63-10, 96-93-66, ryazan@csmedica.ru
- Самара, Офис ООО «СиЗс Медика Самара», ул. Советской Армии, дом 180, стр. 1, оф. 306, тел.: (846) 250-15-79, 250-15-81, 250-51-18, samara@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, ул. Революционная, д. 70, стр. 3, оф. 105, тел.: (846) 267-38-40, csmedica-samara@samara.ru
- Санкт-Петербург, Офис ООО «СиЗс Медика Северо-Запад», Малодетскосельский пр-т, д. 36, тел.: (812) 309-09-80, csnsv@csmedica.ru
- Сервисно-консультационный центр, Малодетскосельский пр-т, д. 36, лит. Н, тел.: (812) 409-40-30, spbservice@csmedica.ru

- Саранск, ООО «СиЗс Медика Саранск», ул. Васенко, д. 15, подъезд №3, этаж 2, комната №222, тел.: (8342) 27-03-24, 22-23-91, csmedica@saransk.ru
- Саратов, ООО «СиЗс Медика Саратов», ул. Чапаева, д. 112/124, тел.: (8452) 79-90-45, 79-90-46, saratov@csmedica.ru
- Саров, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), пр-т Октябрьский, д. 18, тел.: (950) 360-70-77, arz_cs1@bk.ru, arz_cs@bk.ru
- Симферополь, ООО «СервисМедика Крым», ул. Жильцовой, д. 4, пом.2, тел.: (978) 137-90-68, (978)137-90-68, director82@csmedica.ru
- Смоленск, ООО «СиЗс Медика Смоленск», ул.2-я Линия Красноармейской Слободы, д. 5, тел.: (4812) 35-85-68, smolensk@csmedica.ru
- Сочи, ООО «СиЗс Медика Кубань» (Краснодар), Центральный район, ул. Конституции, д. 44/1, тел.: (8622) 61-57-65, cs_medicasochi@mail.ru
- Ставрополь, ООО «СиЗс Медика Ставрополь», ул. Маршала Жукова, д. 7, оф.3 тел.: (8652) 26-38-96, 26-38-93, csmedicavst@mail.ru
- Сургут, ООО «СиЗс Медика Югра», ул. Мелик-Карамова, д. 64, каб. №10, тел.: (3462) 25-46-17, моб.: (912) 817-41-41 surgut@csmedica.ru
- Тамбов, ООО «СиЗс Медика Тамбов», ул. Ореховая, д. 10, пом. 1, тел.: (4752) 49-47-10, tambov@csmedica.ru
- Тверь, ООО «СиЗс Медика Тверь», пр-т Чайковского, д. 23, тел.: (4822) 32-89-66, (4822) 65-65-52, tver@csmedica.ru
- Тольятти, ООО «СиЗс Медика Самара», б-р Гая, д. 1а, оф. 6, тел.: (8482) 74-88-89, tt4@csmedica.ru
- Томск, ООО «СиЗс Медика Томск», ул. Пушкина 18, стр. 1, подъезд №3, 2 этаж, тел.: (3822) 902-703, info_tomsk@mail.ru
- Тула, ООО «СиЗс Медика Тула», ул. Демонстрации, д. 149, тел.: (4872) 36-80-56, tula@csmedica.ru
- Тюмень, ООО «СиЗс Медика Тюмень», ул. Амурская, д.4, оф. 6, тел.: (3452) 34-22-70, cstymet@mail.ru
- Улан-Удэ, ООО «СиЗс Медика Иркутск», ул. Свердлова, д.12Г, тел.: (3012) 210-428, 210-378, csmedicabur@mail.ru
- Ульяновск, ООО «СиЗс Медика Поволжье» (Н. Новгород), Западный б-р, д. 27, оф. 101, тел.: (8422) 68-77-95, 688-128, csmedica.uln@yandex.ru
- Уфа, ООО «СиЗс Медика Башкортостан», ул. Натальи Ковшовой, д. 10, пом.21-24, 30, тел.: 8(347) 200-09-03, 8-800-500-1105, csmedica.ufa@mail.ru
- Хабаровск, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье», ул. Владивостокская, д.16, оф.116, тел.: (4212) 70-12-65, csmedica_hab@mail.ru
- Чебоксары, ООО «СиЗс Медика Чебоксары», ул. Энгельса, д. 28, оф. 107, тел.: (8352) 56-24-08, 57-43-31, csm-ch@mail.ru
- Челябинск, ООО «СиЗс Медика Челябинск», ул. Свободы, д. 145, тел.: (351) 237-48-93, chel@csmedica.ru
- Череповец, ООО «СиЗс Медика Вологда», пр-т Луначарского, д. 51, оф. 11, тел.: (8202) 55-52-63, моб.: (921)834-78-65 csmedicacherepovets@rambler.ru
- Чита, ООО «СиЗс Медика Дальний Восток и Забайкалье» (Хабаровск), ул. Чайковского, д. 30, оф. 10, тел.: (3022) 32-49-03, csmedica-chita@mail.ru
- Шахты, ООО «СиЗс Медика Ростов-на-Дону», ул. Ионова, д. 110а, тел.: (86362) 6-80-52, 6-80-53, shuhti@csmedica.ru
- Ярославль, ООО «СиЗс Медика Ярославль», ул. Салтыкова-Щедрина, д. 44/18, тел.: (4852) 20-12-50, 73-11-82, 90-66-53 cs-yar76@yandex.ru

